

3M™ Soft Cast
Semirigidní fixační obvaz
3M Imobilizace



Funkční,
komfortní, v v
ověřený



3M

3M™ Soft Cast

... jedinečný materiál poskytující alternativní a lepší ošetření

Výhody funkčního znehybnění oproti klasické rigidní imobilizaci jsou dobře známy.*

* Odborné studie a materiály na vyžádání u zástupců společnosti 3M.



- Pomáhá snižovat riziko svalové atrofie, ztuhlosti kloubů, změn a úbytku kloubní chrupavky.
- Umožňuje zkrácení celkové doby rehabilitace, protože svaly i šlachy zůstávají funkční a elastické a k znehybnění dochází jen v místech, kde je ho zapotřebí.
- Rychlejší redukce otoků pomocí dynamického tlaku.
- Bezkonkurenční stabilita a podpora postiženého úseku významně snižující bolestivost a usnadňující proces hojení.

3M Soft Cast

... alternativní materiál

3M Soft Cast je tkaný materiál napuštěný vodou aktivovatelnými pryskyřicemi. Zůstává polotuhý a ohebný, takže poskytuje funkční oporu při léčbě poranění měkkých tkání a při aplikaci ortopedických castů.

3M Soft Cast

... lepší ošetření

3M Soft Cast je speciálně navržen k tomu, aby lékař mohl zvolit úroveň tuhosti potřebnou ke stabilizaci konkrétní zlomeniny / místa poranění a umožnil tak ostatním částem končetiny fungovat co nejlépe. Je snadné ho jak vytvořit, tak sejmout,

má všestranné použití a poskytuje pacientům nebyvalý komfort. Uživatelům - zdravotníkům nabízíme širokou podporu a školení: výuková centra v nemocnicích, výukové materiály, příručku a CD-Rom s názvem "Práce se Soft Castem" ("Working with 3M Soft Cast").




Obvaz dokonale přiléhá

Není potřeba podkládat vatou.



Variabilní opora

Při použití dlahy 3M Scotchcast Longuette nebo 3M Scotchcast Plus a fixačního obvazu 3M Soft Cast je možno cíleně stabilizovat problematické oblasti.

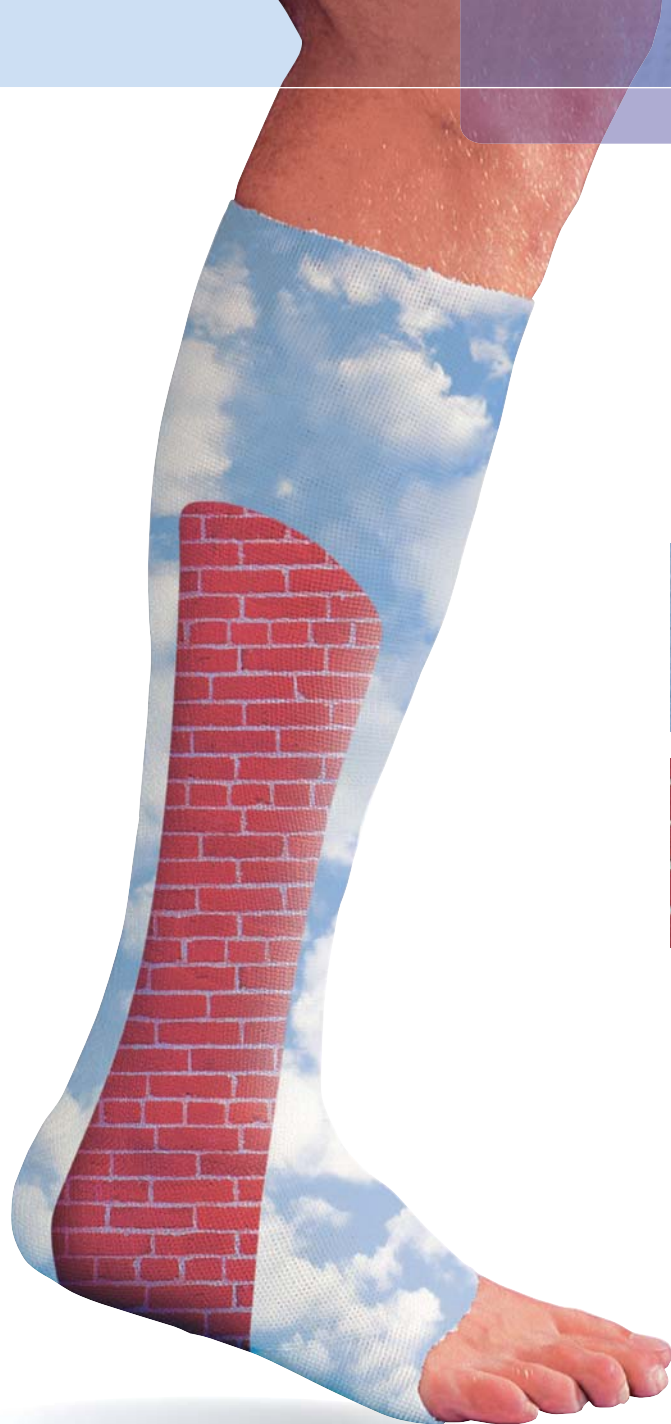

Polotuhá fixace

(3M Soft Cast)

V této úpravě si svaly a šlachy zcela zachovávají svoji funkčnost.



Tuhá fixace

(3M Soft Cast vyztužený dlahou

3M Scotchcast Longuette nebo

3M Scotchcast Plus)

Tato úprava umožňuje úplnou stabilizaci – znehybnění.



Pohyblivost

Výrobek dává pacientovi tolik možnosti pohybu, kolik je potřeba k prevenci ztuhlosti kloubů a k rychlejšímu hojení.



Funkční opora

Díky měkkým okrajům a přiléhavosti při aplikaci dává Soft Cast ideální funkční oporu.



Snadné snímání

3M Soft Cast lze odmotat anebo rozstříhnout pomocí speciálních nůžek. Důležité zejména u dětí nebo pro následné využití částí jako snímatelné podpory (ortézy).

Informace pro objednání

Výrobek	Katalogové číslo	Velikost	Ks / balení
3M™ Soft Cast	82101*	2.5 cm x 1.8 m	10 rolí
	82102*	5.0 cm x 3.6 m	10 rolí
	82103*	7.6 cm x 3.6 m	10 rolí
	82104*	10.1 cm x 3.6 m	10 rolí
	82105	12.7 cm x 3.6 m	10 rolí
Při objednávání barevných fixačních ob vazů 3M Soft Cast nahradte hvězdičku * písmenem určeným pro danou barvu: modrá: B, purpurová: U, červená: R			
3M™ Scotchcast™ Longuette - dlaha	82199	5.0 cm x 20 cm	10 longet
	82299	7.6 cm x 20 cm	10 longet
	82200	7.6 cm x 70 cm	10 longet
	82201	10.1 cm x 90 cm	10 longet
	82202	12.7 cm x 90 cm	10 longet
	82203	7.6 cm x 45 cm	10 longet
3M™ Microfoam™ pěnová náplast	1528-1	2.5 cm x 5.0 m	12 rolí
	1528-2	5.0 cm x 5.0 m	6 rolí
	1528-3	7.6 cm x 5.0 m	4 role
	1528-4	10.1 cm x 5.0 m	3 role
3M™ Adheban™ Plus samolepicí elastická bandáž	2987 AM	3.0 cm x 2.5 m	1 role
3M™ Reston™ samolepicí pěna	1563L	0.5 cm x 10 cm x 4.6 m	1 role
3M™ Scotchcast™ Stockinette - podkladová punčocha	MS01	2.5 cm x 22.8 m	1 role
	MS02	5.0 cm x 22.8 m	1 role
	MS03	7.6 cm x 22.8 m	1 role
	MS04	10.1 cm x 22.8 m	1 role
	MS06	15.2 cm x 22.8 m	1 role
	MS08	20.3 cm x 22.8 m	1 role
	MS10	25.4 cm x 22.8 m	1 role
	MS12	30.5 cm x 9.1 m	1 role
Polypropylenový pásek	FBW1	19 mm x 20.0 m	1 role
Upínací přezky	FBB2	19 mm	50 kusů
Suchý zip s háčkem samolepicí	57938	50 mm x 25.0 m	N/A
Suchý zip s háčkem	57946	50 mm x 25.0 m	N/A
Suchý zip s poutkem samolepicí	57953	50 mm x 25.0 m	N/A
Suchý zip s poutkem	57995	50 mm x 25.0 m	N/A
Sada suchých zipů s háčky a poutky	69677	50 mm x 2.0 m	N/A
Patentní knoflíky	PK 08	8.0 mm	100 kusů
	PK 10	10.0 mm	100 kusů
	PK 12	12.5 mm	100 kusů
	PK 15	15.0 mm	100 kusů
Nůžky na ob vaz 3M™ Soft Cast	23286	18.0 cm	1

Obsažené látky

3M Soft Cast: polyuretanová pryskyřice (PUR), nosná tkanina; obal: hliní/polypropylen.

Pokyny pro likvidaci

3M Soft Cast lze za předpokladu ztuhnutí materiálu likvidovat jako průmyslový odpad podobný domovnímu odpadu.

V opačném případě je nutné ho likvidovat jako zvláštní odpad. Při řádném spálení nebo uložení nevznikají žádné látky ohrožující životní prostředí.



3M Česko, spol. s r.o.

V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel: (420) 261 380 111
Fax: (420) 261 380 110
www.3M.cz/lehkasadra

Prosíme recyklujte.

3M, Adheban, Microfoam, Reston, Scotchcast a Soft Cast jsou ochranné známky společnosti 3M.

© 3M 2012.

1260-101-EU JK/Graphix